



People.Health.Care.

Sentinex® PRO OP-Mantel Urologie

Besonderer Schutz gegen
hohe Flüssigkeitsmengen.

Auch im **Kitpack®**
verfügbar.





Sentinex® PRO OP-Mantel Urologie

Besonderer Schutz gegen hohe Flüssigkeitsmengen.


Der neue Sentinex PRO OP-Mantel Urologie ist besonders geeignet für urologische und gynäkologische Eingriffe mit sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen.

Er entspricht der Leistungsstufe „Hoch“ gemäß EN 13795 und erfüllt alle Anforderungen des AAMI-Standards auf Level 3.

Darüber hinaus ist die Verpackungsvariante mit Sterileinschlag und zwei Handtüchern sehr gut zum sterilen Anrichten geeignet.

Eine Kombination aus unterschiedlichen Materialien sorgt für optimalen Schutz und Tragekomfort:

Der untere Bereich besteht aus PE-Folie. Die dadurch gegebene Barrierewirkung gegen Flüssigkeitspenetration sorgt für ein Abfließen von Flüssigkeiten.

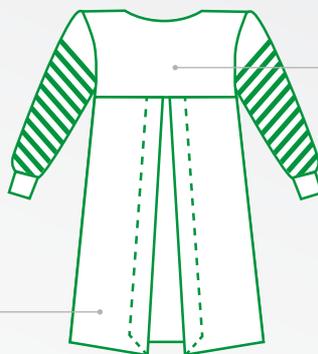

Der obere Teil besteht im Brust-, Schulter- und Ärmelbereich aus Spunlace-Material mit Verstärkung im Ärmelbereich.

Das flüssigkeitsabweisende Spunlace-Material bietet durch seine textile Anmutung optimalen Tragekomfort.

Sentinex® PRO OP-Mantel Urologie

Größe	Länge (cm)	REF	VE (Stück)
XL	150	142 708	40