

Vertrieb durch:

www.praximed.com
info@praximed24.eu
Fax 037754-2393



aks-B4 compact



Innovativer Hebepflegerahmen
mit standfesten Argumenten



Einmalig:
Nur 114 cm,
dennoch sehr stabil!

Breite 84 cm

- leicht ins vorhandene Bett
zu Hause integrierbar
- komplett elektrisch verstellbar
 - Hubschere 9 kg leichter
 - HMV-Nr.: 19.40.03.0021
- Pflege-HMV-Nr.: 50.45.03.0021

made in troisdorf

Stand: 01|2009



aks
aktuelle krankpflege systeme

Antwerpener Straße 6
53842 Troisdorf
Fon: 02241 9474-0
Fax: 02241 9474-88
E-mail: aks@aks.de
Web: www.aks.de



aks-B4 compact


Innovativer Hebepflegerahmen mit standfesten Argumenten

- 1 erhöhter Liegekomfort durch viergeteilte Liegefläche
- 2 komplett mit Knieknick elektrisch verstellbar
- 3 niedrige Einstiegshöhe und großer Höhenstellbereich zur optimalen Anpassung an die Arbeitshöhe für rückschonendes Arbeiten
- 4 stabiler Metallrahmen mit bequemen Federleisten
- 5 fester Stand bei nur 114 cm Länge des Unterrahmens durch eigens entwickelten aks-Scherenhub
- 6 sicherer Stand durch einstellbare Distanzhalter im Bettrahmen mit Bohrungen zur Schraubbefestigung
- 7 einfache Montage und bequemer Transport: Unterrahmen ohne Werkzeug abnehmbar, Oberrahmen in zwei Teile zerlegbar
- 8 Flexibilität bei der Aufrichteranbringung durch zwei Aufnahmen
- 9 über Matratzenhalter verstellbar: in der Breite von 90 auf 100 cm und in der Länge von 190 auf 200 cm
- 10 ergonomische Handbedienung mit Großtasten, integrierter Sperrfunktion und Prüfung der Erstfehlersicherheit durch Schwestern-Schlüssel
- 11 Netzfreeschaltung: Dieses Sicherheitssystem trennt den Hebepflegerahmen allpolig bei Nichtbetätigung der Handbedienung elektrisch vom Stromnetz.

optional:

- 12 Liegeflächenverbreiterungssatz auf 100 cm fix
- 13 Seitengitter, steckbar mit Spezialhalterung
- 14 leichter Aufbau durch eine Person mittels der einfachen Montagehilfe
- 15 Aufrichter mit Haltegriff und Gurt
- 16 rollbare Transport- und Lagerhilfe, optimiert für den Transport auf Europaletten (2 Stück je Palette), mit Aufnahmevorrichtung bei Bestellung des Liegeflächenverbreiterungssatzes
- 17 Erhöhungssatz zur verbesserten Lifterunterfahrbarkeit

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

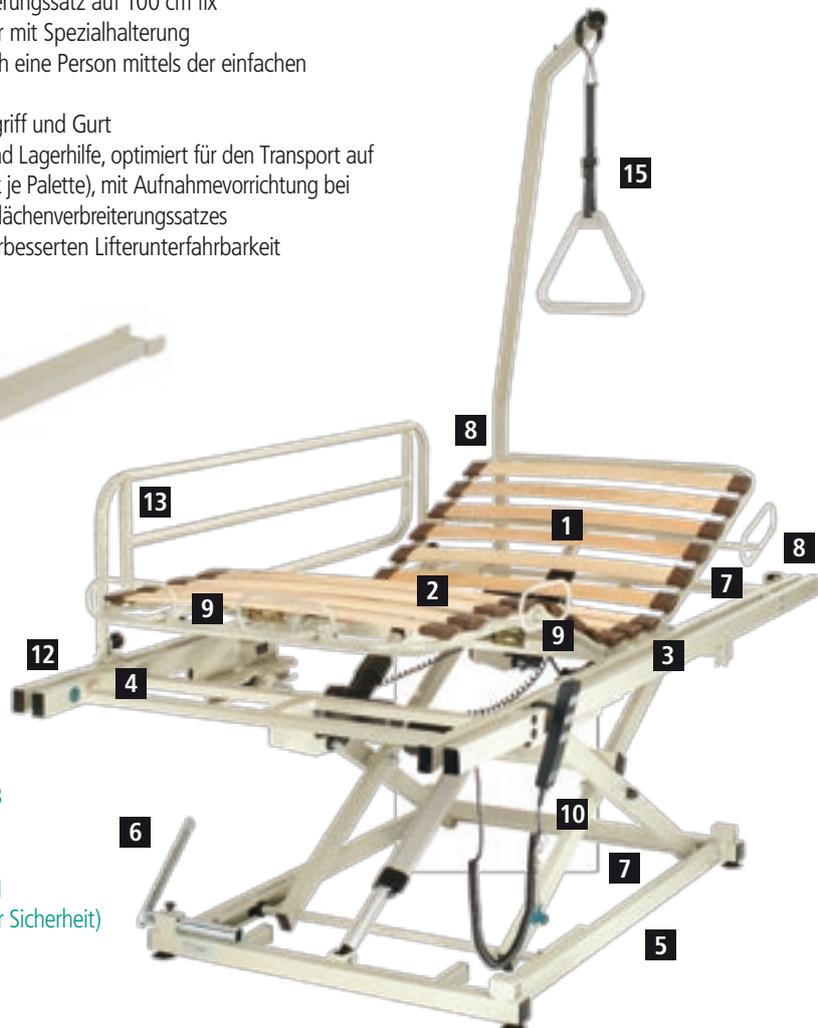

Technische Daten

Liegefläche (B x L)
für Matratzengrößen
Höhenverstellung
Eingangsspannung
Leistungsaufnahme
Schutzklasse
Schutzart
Gefertigt nach

85 x 186 cm
90/100 x 190/200 cm
30 – 80 cm
230 V ~ 50/60 Hz
max. 150 W
II, Anwendungsteil Typ B
IP x4
DIN EN 1970
DIN EN 60601-2-38+A1
(in Bereichen elektrischer Sicherheit)
170 kg
2 Jahre
33603

Sichere Arbeitslast
Garantie
Bestell.Nr.

